

SULCUS CILIARIS / nitrooční čočky / NOČ Add-On Diffractiva, Secura



Nitrooční čočka Add-On Diffractiva- sPB/-sPBY 1kusová, foldovatelná, difrakční, NOČ pro implantaci do sulcus ciliaris

bikonvexní, asférická NOČ bez aberace; vynikající PCO chování

optika:

materiál	hydrofobní MicroSil
průměr optiky	7,0 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	6,0 - 6,0 Dpt po 0,5 Dpt +3,5 Dpt adice do blízka
design asférický	zajišťuje redukci sférických aberací a dostatečnou hloubku fokusu k podpoře středního vidění
design monofokální /difrakční	prstencová struktura NOČ Diffractiva je difrakční ve vnitřní oblasti; velká monofokální část na periferii čočky nabízí vynikající optické vlastnosti
žlutý filtr	ano u modelu -sPBY

zvýšený komfort při čtení na optimální vzdálenost

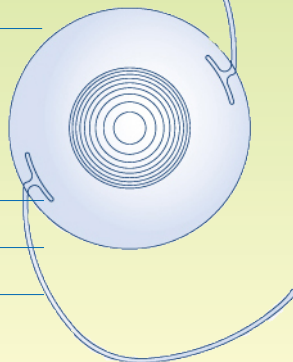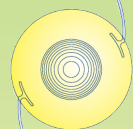

haptika:

materiál	vysoce molekulární PMMA
celk. průměr	14,0 mm
design	modifikovaná C-smyčka
incize	3,0 mm

Nitrooční čočka Add-On Secura- sPB/-sPBY 3kusová, foldovatelná, monofokální NOČ pro implantaci do sulcus ciliaris



pro snadnější získání požadované dioptrie kombinací **dvou** tenkých **čoček s nižší dioptrií**

- během jednoho zákroku je do kapsulárního bagu naimplantována standardní NOČ a do sulku Add-On NOČ (v případech extrémně vysoká HYPEROPIE)

optika:

materiál	hydrofobní MicroSil
průměr optiky	7,0 mm (efektivní zóna 6 mm)
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	-6,0 - -0,5 Dpt po 0,5 Dpt 0,5 - 6,0 Dpt po 0,5 Dpt
design	konvexně-konkávní tvar s kulatou přední hranou proti poškození duhovky; bez aberace
žlutý filtr	ano u modelu -sPBY

pro případy extrémně vysoké hyperopie

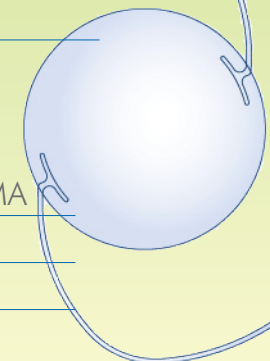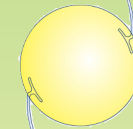

haptika:

materiál	vysoce molekulární PMMA
celk. průměr	14,0 mm
design	modifikovaná C-smyčka
incize	3,0 mm